


体重・体組成計 FG-WTS01 シリーズ 取扱説明書

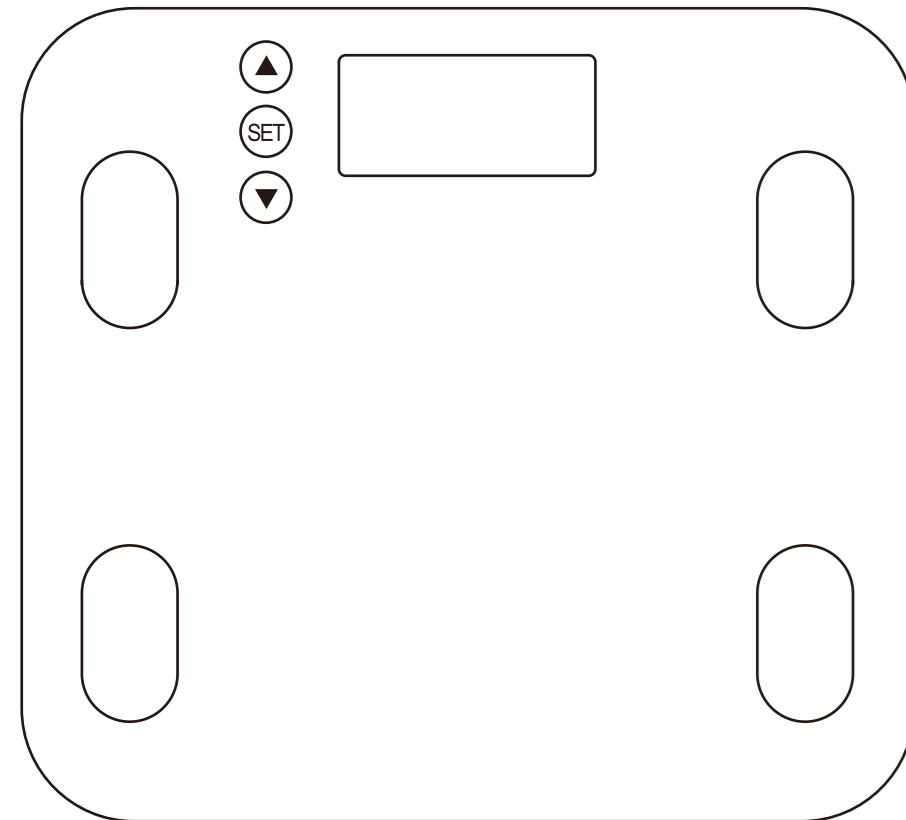

弊社商品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を読んで、本商品の機能と操作を理解してご使用いただけますようお願いいたします。
また、取扱説明書はレシート等のご購入履歴とともに大切に保管いただけますようお願いいたします。

1.パッケージ内容

- ・製品本体 1
- ・乾電池 単4(テスト用) 2
- ・取扱説明書 1

2.本商品の主な機能


- (1) 以下の11項目のチェックができます。
(体重以外のチェックは個人情報の登録が必要です。)
- ・体重
 - ・体脂肪率
 - ・水分
 - ・マッスル率
 - ・骨質量
 - ・基礎代謝
 - ・BMI
 - ・タンパク質
 - ・皮下脂肪
 - ・内臓脂肪
 - ・理想体重
- (2) 個人情報の登録は12名まで可能です。
(3) 上に乗るだけで電源オンして測定を開始します。(体重測定のみ)
(4) 上面は強化ガラスを使用しています。
(5) 厚さ約22mmの薄型設計

3.注意事項


- (1) 本製品は固い平らな床に設置してご使用ください。
カーペットの上などの柔らかい床の上では正しい測定ができません。
- (2) 本製品は測定時に微弱な電流を体内に流します。
下記のような医用電気機器に誤動作を与えて生命にかかわる危険が発生する場合があります。
該当する方は使用をしないでください。
・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
・人工心臓などの生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器
- (3) 滑って転倒する危険がありますので濡れた床の上での使用や濡れた足での使用はしないでください。
- (4) 測定は素足で静かにセンサー部分に合わせて乗ってください。
足が濡れている場合は水分をふき取ってください。
- (5) ディスプレイや設定パネルの上には乗らないでください。
(6) 飛び乗ったり、上で飛び跳ねたりしないでください。
(7) 計測した測定結果は参考としてください。測定結果を自己判断して過度なダイエットを行ったり医療行為などを行ったりしないでください。
(8) 分解や改造は絶対にしないでください。
(9) 長期間使用しない時は電池を外してください。
(10) 高温のシャワー/風呂またはサウナ室でのご使用はできません。
- (11) 本製品を落下させたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- (12) 小さなお子様が使用する時は必ず大人の方が付き添ってください。
- (13) 本製品を業務用又は商売での測定、計量に使用しないでください。

4.本体の操作部位および各部の説明

- ・液晶ディスプレイ : 数値や情報を表示します。
- ・タッチキー : 個人情報の登録、表示の切り替えをします。(▲▼: 選択、SET: 決定)
- ・センサー部 : 上に乗ると自動で電源オンして測定します。
- ・電池ホルダー : 単4電池2本を使用します。

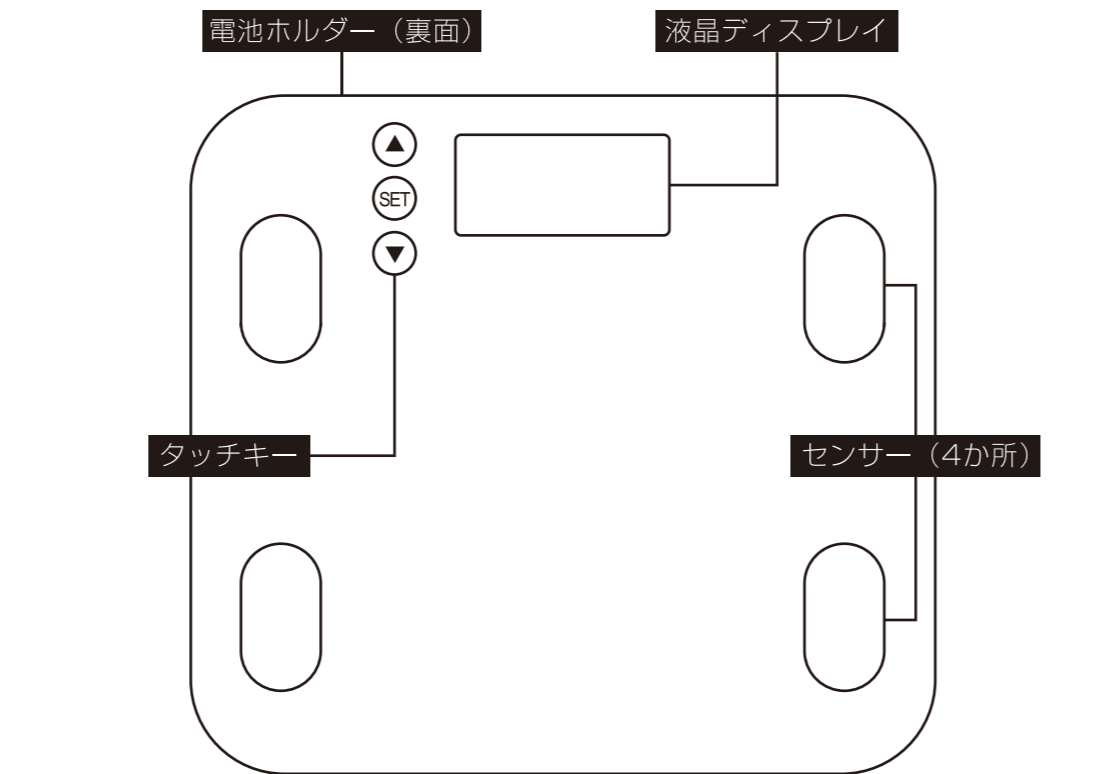

5.ご使用前の設定

- (1) 乾電池をいれる
本体裏面の電池ホルダーのカバーを開けて、単4電池2本を入れて下さい。
※付属の電池はテスト用のものです。
※電池の極性を間違えないようにしてください。
※新旧または異なるメーカーの電池を組み合わせ使用しないでください。
- 電池残量が少なくなると警告アイコンが表示されるので電池を交換してください。

- (2) 個人情報を登録する
・タッチキーの「SET」を押すと設定画面になります。「▲」と「▼」を押してP1～P12のどれかを選択して「SET」を押してください。
※個人情報はP1～P12の12名分登録ができます。
・「性別」, 「身長」, 「年齢」を登録してください。

6.ご使用方法

(事前に5.ご使用前の設定(2)の個人情報を登録するを行って下さい。)

- (1) タッチキーの「SET」を押します。
(2) タッチキーの「▲」または「▼」を押して測定したい方の登録データ(P1～P12)を選択します。
(3) タッチキーの「SET」を0.0Kgと性別が表示されるまで押します。
※身長、年齢の変更がある場合は「▲」または「▼」を押して変更する事ができます。
(4) 素足で静かにセンサー部に合わせて乗って下さい。


- (5) 体重値が安定すると測定が開始されますので、静かにお待ちください。
※測定中は「□□□□」表示が1つずつ減っていきます。
(6) 測定が完了すると液晶ディスプレイに結果が順次表示されます。
※測定結果は「▲」「▼」で進めたり、戻したりすることができます。

※体重だけを測定する場合は乗るだけで自動で電源がオンになり体重を測定できます。

7.ディスプレイ表示

測定が完了すると下記の順番でデータが順次表示されます。

体脂肪率 (Fat) → 水分 (WAT) → マッスル率 (MUS) → 骨質量 (Bone) → 基礎代謝 (BMR) → BMI (BMI) → タンパク質 (Prot) → 皮下脂肪 (Subcutaneous Fat) → 内臓脂肪 (VFA) → 理想体重 (Ideal Weight) → 体重 (Weight)

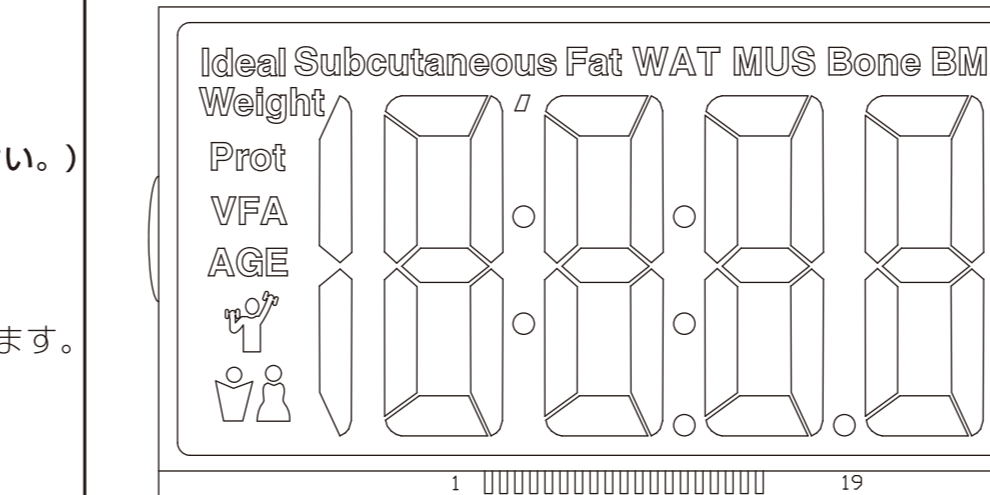

※表示が完了してしばらくすると電源は自動でオフになります。
※体重の単位は「Kg」のみで切替は出来ません。

8.測定項目の説明

- (1) 体脂肪率 : 体重に対する脂肪の割合を%で示します。
(2) 水分 : 体重に対する水分量の割合を%で示します。
(3) マッスル率 : 体重に対する筋肉量の割合を%で示します。
(4) 骨質量 : 骨の質量をkgで示します。
(5) 基礎代謝 : 基礎代謝量をカロリー (Kcal) で示します。
(6) BMI : BMI (ボディマス指数) を示します。
BMIは体重 (kg) ÷ 身長 (m) 2で計算されます。
(7) タンパク質 : 体重に対するタンパク質の割合を%で示します。
(8) 皮下脂肪 : 体重に対する皮下脂肪の割合を%で示します。
(9) 内臓脂肪 : 体重に対する内臓脂肪の割合を%で示します。
(10) 体重 : 体重を示します。
(11) 理想体重 : 登録した身長での一般的な理想体重を示します。

9.故障かなと思ったら

- (1) 測定値した値が日ごとに大きく異なる
・平らな固い床面に置いて測定しているかを確認してください。
・センサー部に汚れ等が無いか確認してください。
・濡れた足で測定していないか確認してください。
・極力衣服を着ないで、同じ時刻に測定してください。
- (2) 体重値がおかしい
・平らな固い床面に置いて測定しているかを確認してください。
・0kg補正が出来ていない場合があります。
ディスプレイ表示が0.0kgになってから体重計に乗って下さい。

10.主な仕様

- (3) 体重以外の値がおかしい
・登録データが正常であるか確認してください。
・測定者の登録データで測定しているか確認してください。(P1で登録した人はP1で測定してください。)
・濡れた足や体で測定していないか確認してください。
・寝たきりの高齢者やウエイトトレーニングで極端に体脂肪率が少ない方などは正常に測定できない場合があります。
- 測定範囲 : 0.2kg～180kg
最小表示 : 0.1kg
体重計精度 : ≤50kg±0.2kg
>50kg≤90kg±0.2kg
>90kg≤180kg±0.3kg
- 登録人数 : 最大12人
使用電池 : 単4電池 2本
寸法 : 約W290 x H260 x D22mm
重量 : 約1.1kg
ロット番号 : 20200920001

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-WTS01シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____

	お名前 _____
	電話 (____) _____
販売店	販売店名 _____